


Midline 中等长度导管参数

导管规格	导管长度	REF	流速	死腔容量	订货代码
3Fr	15cm	PB-A 3Fr×15cm	10.4	0.28	A120-03115-01
	20cm	PB-A 3Fr×20cm	8.4	0.29	A120-03120-01
	15cm	PB-B 3Fr×15cm	10.4	0.28	A120-03115-OTN-01
	20cm	PB-B 3Fr×20cm	8.4	0.29	A120-03120-OTN-01
4Fr	15cm	PB-A 4Fr×15cm	63	0.37	A120-04115-01
	20cm	PB-A 4Fr×20cm	52	0.41	A120-04120-01
	15cm	PB-B 4Fr×15cm	63	0.37	A120-04115-OTN-01
	20cm	PB-B 4Fr×20cm	52	0.41	A120-04120-OTN-01
5Fr	15cm	PB-A 5Fr×15cm	89	0.39	A120-05115-01
	20cm	PB-A 5Fr×20cm	77	0.42	A120-05120-01
	15cm	PB-B 5Fr×15cm	89	0.39	A120-05115-OTN-01
	20cm	PB-B 5Fr×20cm	77	0.42	A120-05120-OTN-01
5Fr*2	15cm	PB-A 5Fr2×15cm	红:31 白:30	红:0.34白:0.34	A120-05215-01
	20cm	PB-A 5Fr2×20cm	红:24 白:23	红:0.37白:0.34	A120-05220-01
	15cm	PB-B 5Fr2×15cm	红:31 白:30	红:0.34白:0.34	A120-05215-OTN-01
	20cm	PB-B 5Fr2×20cm	红:24 白:23	红:0.37白:0.34	A120-05220-OTN-01

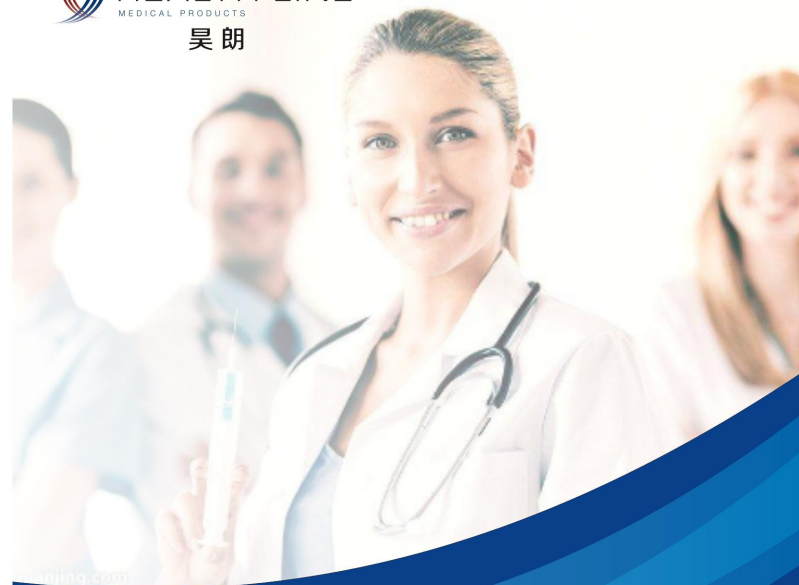

昊朗科技(佛山)有限公司
 销售部: 0757-88027058
 市场部: 0757-82160726
 网站: www.chlic.cn
 地址: 广东省佛山市禅城区南庄吉利工业园新源2路39号
 佛山市昊宁康医疗器械有限公司
 地址: 佛山市禅城区城门头西路1号1205
 电话: 0757-82369566
 传真: 0757-82160736
 网址: www.chlic.cn
 邮箱: hlcfoshanorders@hlic.net

ISO13485:2016
 Certified Quality System



Midline中等长度导管
 更可靠、更放心的基础输液工具



置管更便捷，不需要做导管尖端定位

➤ 适用科室

- ✓ 2018年，PIV中等长度导管上市，在满足基础输液需求的同时，还满足儿科、妇产科、肿瘤科、CT等特殊用药群体的输注需求。


➤ 留置时间30天以内

- ✓ 更好的填补了留置针（3-5天）和PICC（1个月-1年）留置时间的空白



何为中等长度导管（Midline Catheter）？

中等长度导管是经由前臂肘窝位置的贵要静脉、头静脉和肘正中静脉进入，长度在7.5—20cm，尖端位于肘窝水平或肩下部，但不到达中心静脉的一类外周静脉导管。

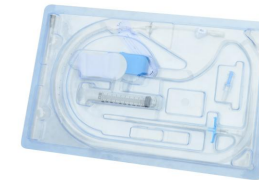

一、2011年，美国疾病预防控制中心在预防导管相关性血流感染指南中指出：中长导管的血流感染发生率低于中心静脉置管。

二、2016年，美国输液护士协会(Infusion Nurses Society, INS)静脉输液治疗护理实践标准推荐：中线导管应用于抗菌药物，补液和外周静脉治疗对其具有良好耐受的镇痛药。

多种解决方案供您选择

- 配有单腔、双腔各种尺寸、长度供您选择
- 配有套管穿刺针（OTN）的套件；改良型塞丁格（MST）的套件。

